


Ø 5.5mm D2/D3/D4

**Chirurgický protokol
pro velmi měkkou/měkkou/středně
tvrdou kost.**

**Tento postup je identický pro
všechny délky.**

Chirurgický protokol navržený společností medentis medical
je pouze doporučením.

Obecně platí pro všechny vrtáky, pro všechny průměry
implantátů a ve všech kostních třídách pravidlo, že předepsaná
sekvence vrtání se může lišit. Pokud je kost měkčí, doporučuje se
méně kroků. Čím tvrdší kost, tím více mezikroků se doporučuje.

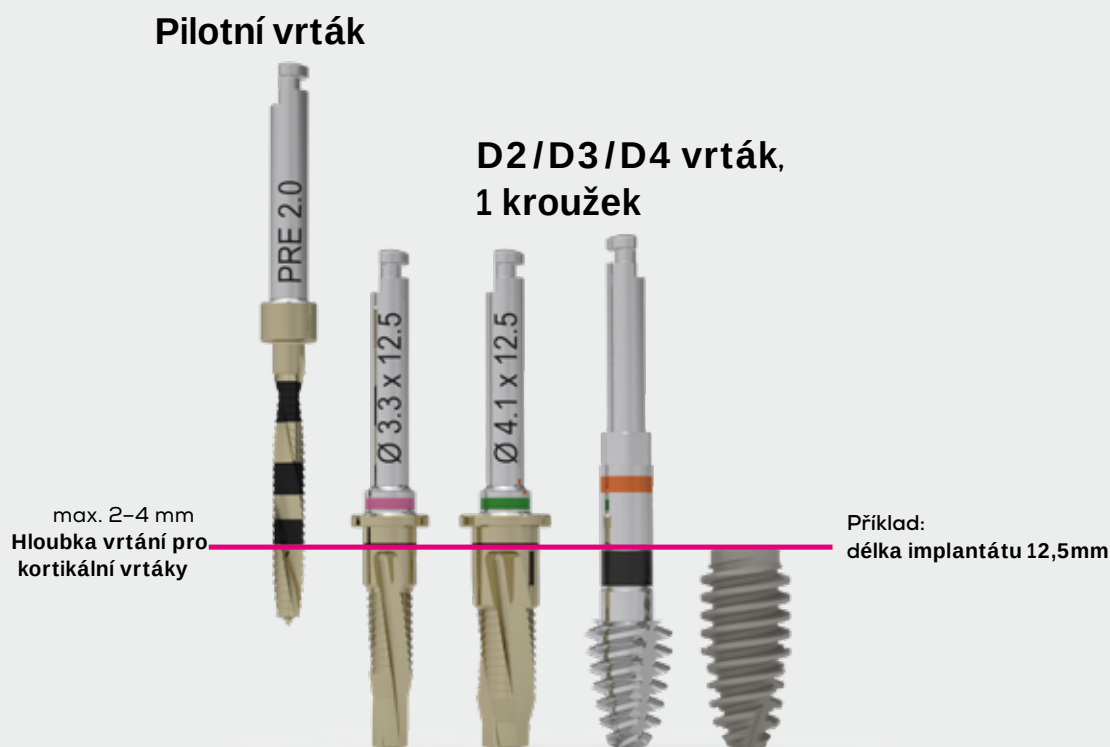

ICX-ALL-IN-ONE[®]
DRILLS




Ø 5.5mm D1

**Chirurgický protokol pro tvrdou kost.
Používejte pouze vrtáky
se 3 zelenými kroužky.**

**Tento postup je identický pro
všechny délky.**

Chirurgický protokol navržený společností medentis medical je pouze doporučením.

Obecně platí pro všechny vrtáky, pro všechny průměry implantátů a ve všech kostních třídách pravidlo, že předepsaná sekvence vrtání se může lišit. Pokud je kost měkčí, doporučuje se méně kroků. Čím tvrdší kost, tím více mezikroků se doporučuje.

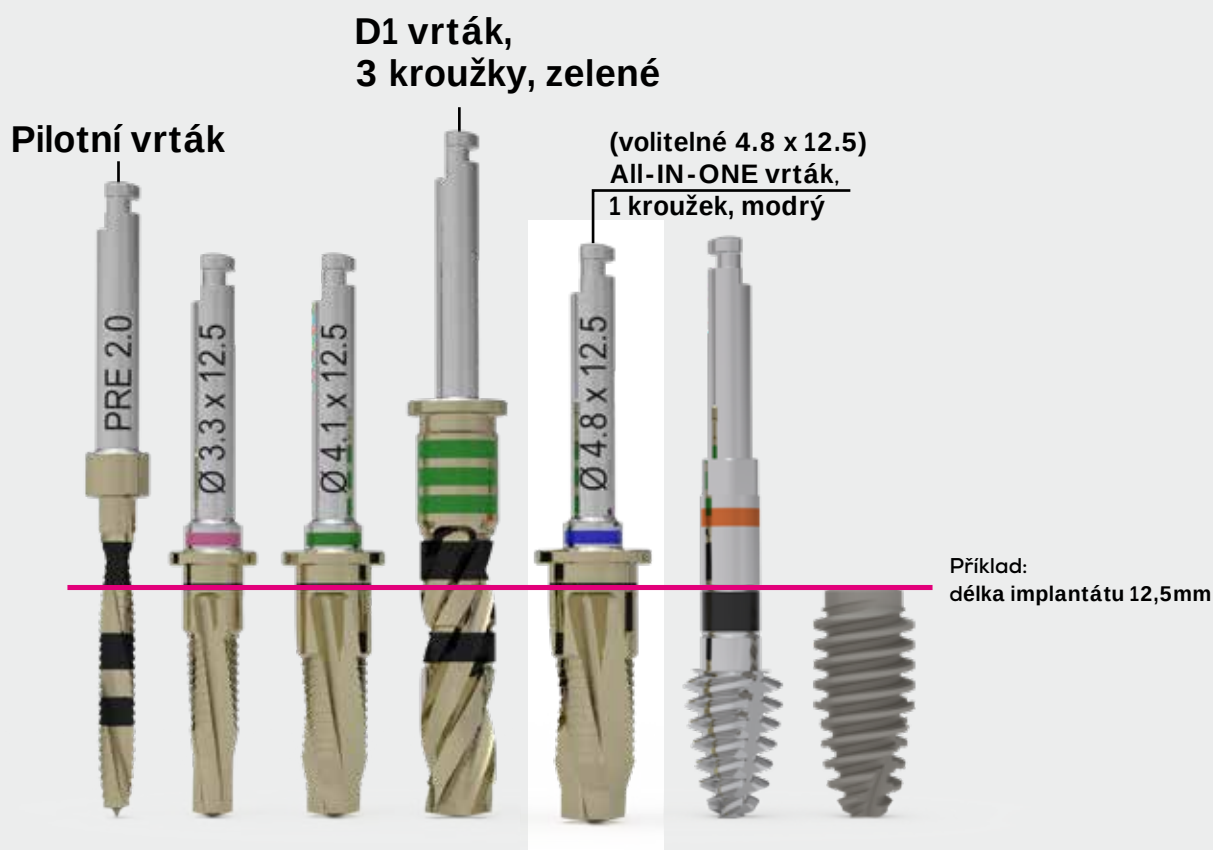

ICX-ALL-IN-ONE[®]
DRILLS




Ø 6.2mm D2/D3/D4

**Chirurgický protokol
pro velmi měkkou/měkkou/středně
tvrdou kost.**

**Tento postup je identický pro
všechny délky.**

Chirurgický protokol navržený společností medentis medical
je pouze doporučením.

Obecně platí pro všechny vrtáky, pro všechny průměry
implantátů a ve všech kostních třídách pravidlo, že předepsaná
sekvence vrtání se může lišit. Pokud je kost měkkší, doporučuje se
méně kroků. Čím tvrdší kost, tím více mezikroků se doporučuje.

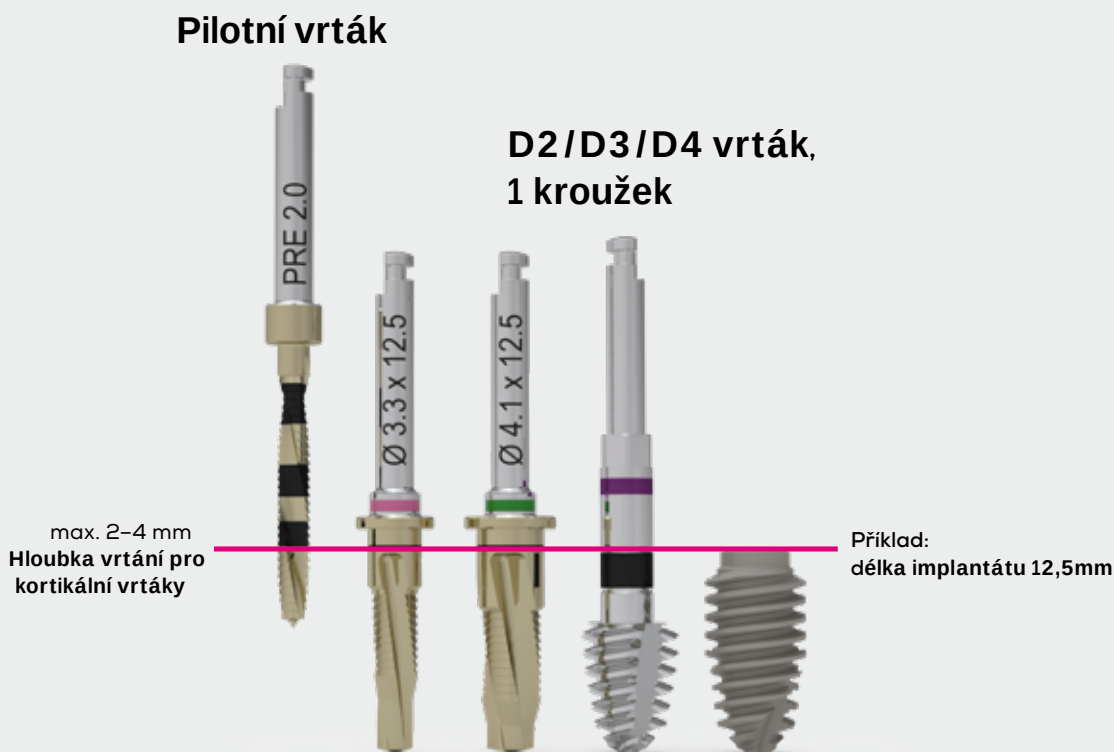

**ICX-ALL-IN-ONE[®]
DRILLS**



Ø 6.2mm D1


Chirurgický protokol pro tvrdou kost.

**Používejte pouze vrtáky
se 3 zelenými kroužky.**

**Tento postup je identický pro
všechny délky.**

Chirurgický protokol navržený společností medentis medical je pouze doporučením.

Obecně platí pro všechny vrtáky, pro všechny průměry implantátů a ve všech kostních třídách pravidlo, že předepsaná sekvence vrtání se může lišit. Pokud je kost měkčí, doporučuje se méně kroků. Čím tvrdší kost, tím více mezikroků se doporučuje.

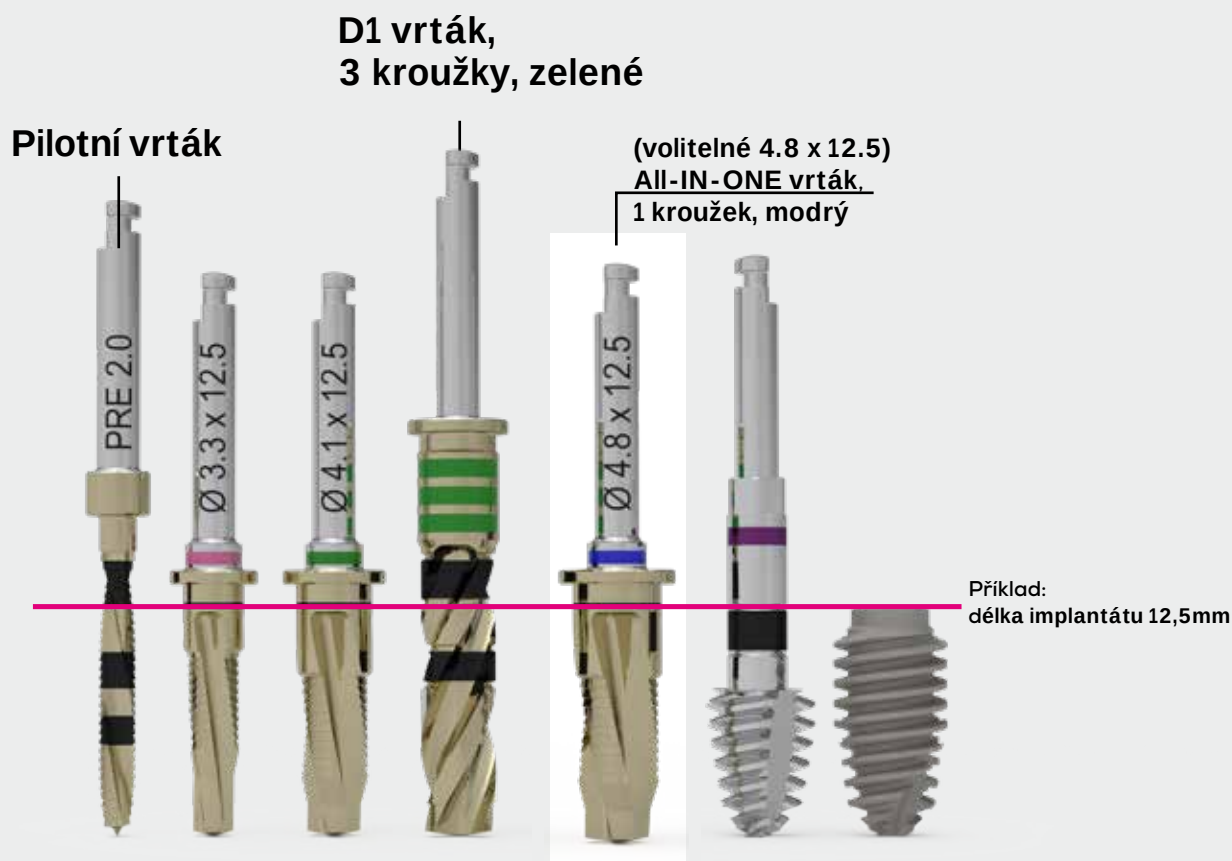

**ICX-ALL-IN-ONE[®]
DRILLS**

